

SPICARE
V3 aggressivo kassa RF



初代「kassa」から追加機能を加えバージョンUP!!

小型マシンなのに、細かいところまでピクッと密着!!
ピンポイントで刺激を与え、理想的なラインに引き上げていきます。

EMS
ラジオ波

引き上げ パッティング


EMS機能とラジオ波が同時に顔の
筋肉やツボに作用し、神経システム
を刺激、自律神経を整えます。

神経組織の修復と
筋肉の自然収縮を
コントロール!!

RF(ラジオ波)とは?

ラジオ波の温熱効果は皮膚や脂肪の奥深いところまで届き、体内の脂肪細胞
など細胞レベルを活性化させ、熱エネルギーを発生させます。
中性脂肪を液化化することで体外に排出されます。液化化した脂肪は、その後
リンパ管や尿を通じて体外にされることで痩身効果が期待できます。

ラジオ波を当てる前

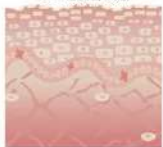

弾力やハリがなくなったお肌

ラジオ波を当てる後



お肌が活性化し、
ハリを取り戻します。

—より小顔、さらにもっと小顔—

肌引き締めケアの新たなアプローチを実現。自宅にいながら、まるでエステ気分。

電極部

電源/レベルボタン

【モード】

- 弱 LOW
グリーンライト
- 中 MIDDLE
オレンジライト
- 強 HIGH
レッドライト



¥38,280 ^(税込)

顔・首・頭皮に使用可能!
USBで充電!

使用方法

モードはお好みで3段階からお選びください。

下準備

お手持ちのジェルやローションなどお好みのものを塗布する。
・顔・目の周り・鼻周り・口周り・顎ライン・乳突筋



1

縦に頭頂に向かってゆっくりと
かけていく。

※音が苦手な方はレベルを下けても良い。
仕上げに生え際やアイラインの延長線を上
優しくなぞる程度にマッサージする。



2

耳の周りをしっかりと
マッサージする。

3

耳の後ろや乳突筋、顎のラインに沿って
しっかりとマッサージする。



4

目・鼻・口周りを優しくマッサージする。

顔の周りは筋肉の流れに沿って
滑らすようにマッサージをすると良い。

【使用上の注意】

◎使用中、ブザーがなると充電不足です。その時は充電してください。
充電中は使用しないでください。

◎充電中グリーンライトが点滅し、充電が終了すると消灯します。

◎機械に異常などがあった場合、販売店もしくは販売元にご連絡ください。